

小鼠胆管类器官培养试剂盒

货号：MN1008

产品描述

小鼠胆管类器官培养基是一种可应用于细胞或组织来源的小鼠胆管类器官建立和长期培养的无血清培养基。在细胞外基质存在的条件下，培养基所含的特有组分及丰富的细胞因子能促使小鼠胆管细胞迅速增殖并形成小鼠胆管类器官。类器官形成过程平稳且迅速，同时保持较高的小鼠胆管细胞特性和活力，为后续基于小鼠胆管类器官生理功能、疾病研究提供支持，并助力精准医学的蓬勃发展。

产品组分

产品名称	货号	规格	储存温度
小鼠胆管类器官基础培养基 A	MN1008-A100	100 mL	4°C, 12 个月
小鼠胆管类器官培养基添加物 B (25x)	MN1008-B1	1 mL×4	-20°C，避免反复冻融，12 个月
小鼠胆管类器官培养基添加物 C (250x)	MN1008-C04	0.4 mL	-20°C，避免反复冻融，12 个月
小鼠胆管类器官培养基添加物 D (2000x)	MN1008-D005	0.05 mL	-20°C，避免反复冻融，12 个月

产品应用

使用无菌操作技术配制小鼠胆管类器官完全培养基。以下是准备 50 mL 完全培养基操作流程，如所需量不同，可按比例调整用量。

1.0-4°C上解冻小鼠胆管类器官培养基添加物 B (25x)、小鼠胆管类器官培养基添加物 C (250x)以及小鼠胆管类器官培养基添加物 D (2000x)。

注意：1、解冻后，建议将类器官培养基添加物 B (25x)、类器官培养基添加物 C(250x)和类器官培养基添加物 D(2000x)分别分装后-20°C 保存取用，避免反复冻融。

2、分装时需待溶液完全融化，确认其澄清、透明、无不溶物（如有上述异常可将溶液置于室温/37°C 并轻轻吹打），充分混匀后分装。

3、每次使用前也应注意将溶液完全融化、充分混匀。

2.将 2 mL 小鼠胆管类器官培养基添加物 B (25x)、200 μ L 小鼠胆管类器官培养基添加物 C (250x)和 25 μ L 小鼠胆管类器官培养基添加物 D (2000x)加至 48.775 mL 小鼠胆管类器官基础培养基 A 中，充分混匀，配置成 50 mL 小鼠胆管类器官完全培养基。

注意：配制后的小鼠胆管类器官完全培养基可在 2-8°C 储存，建议在一周内使用。

3.使用时可选择性在小鼠胆管类器官完全培养基中加入真菌或者细菌抗生素。

小鼠胆管类器官原代建立

1.取样：将合理来源的小鼠处死后解剖所得的胆管组织置于**组织保存液（货号 BM1002）**中于 2-8°C 储存，并在指定时间内处理，进行类器官建立。

2.清洗：去除组织保存液，用适量 PBS 清洗组织样本 2-3 次。

3.组织消化：将组织样本转移至 15 mL 离心管中，加入 1-2 mL **组织消化液（货号 BM1003）**，然后用无菌的手术剪刀将组织剪碎成 1 mm³ 左右的小碎片，置于 37°C，100rpm 恒温振荡培养箱中消化 30-50 min。

注意：每间隔 15 min 吹打一次并观察消化状态。

4.过滤：在确认消化完成的组织悬液中加入胎牛血清至终浓度达 10% 后吹打混合均匀以终止消化，之后将悬液用 100 μ m 细胞过滤器过滤至全新的 15 mL 离心管中。

5.红细胞裂解(可选):将上述所得滤液以300 g 离心力离心3min 后弃上清,根据沉淀颜色观察是否需要裂红,若需要则加入1 mL **红细胞裂解液(货号 BM1008)**,充分混匀,置于2-8℃,1-3 min。

6.清洗:将4或5中所得细胞悬液以300 g 离心力离心3 min 后弃上清,用PBS 清洗1-2 遍。

7.细胞接种:完成清洗后将细胞悬液以300 g 离心力离心3min 后弃上清,置于冰上预冷,加入适量**类器官专用基质胶(货号 BM1001)**混匀(建议细胞量:1000-2000 个/ μ L),按照每孔30-40 μ L 将细胞悬液点入24 孔板中。将孔板置于37℃、5% CO₂ 恒温培养箱中20-30min,使基质胶凝固。待基质胶凝固完成,缓慢向每孔加入500 μ L 小鼠胆管类器官完全培养基。

注意: 不要将培养基直接添加到基质胶胶滴的顶部,因为这可能会破坏已凝固结构。

8.培养:将上述培养板置于37℃、5% CO₂ 的恒温培养箱中培养,每3 天换液,观察,拍照记录。

注意: 不要过度稀释基质胶(基质胶浓度应 $\geq$ 70%)。

小鼠胆管类器官传代培养

9.收集:使用**抗黏附润洗液(货号 BM1006)**润洗的1mL 枪头小心刮取类器官,并将其转移至1.5mL EP 管中。之后将收集到的液体以300 g 离心力离心3min 后弃上清。

注意: 弃上清时请保留残留基质胶,防止带走未脱离基质胶的类器官。

10.消化:在上述9 中所得的沉淀中加入0.5 mL **类器官传代消化液(货号 BM1004)**,用1mL 移液器上下吹打后,置于37℃,5%CO₂ 恒温培养箱静置消化3-6min。

11.终止消化:在消化完成之后加入0.8 mL 2-8℃预冷的PBS 终止消化,并上下吹打,以帮助类器官更好的解离。

12.清洗:将上述11 中所得液体以300 g 离心力离心3min 后弃上清。用PBS 重悬清洗1-2 次。

13.细胞接种:完成清洗后将细胞悬液以300 g 离心力离心3min 后弃上清,置于冰上预冷,加入适量**类器官专用基质胶(货号 BM1001)**混匀(建议细胞量:1000-2000 个/ μ L),按照每孔30-40 μ L 将细胞悬液点入24 孔板中。将孔板置于37℃、5% CO₂ 恒温培养箱中20-30min,使基质胶凝固。待基质胶凝固完成,向每孔加入500 μ L 小鼠胆管类器官完全培养基。

14.培养:将上述培养板置于37℃、5% CO₂ 的恒温培养箱中培养,每3 天换液,拍照并观察记录。

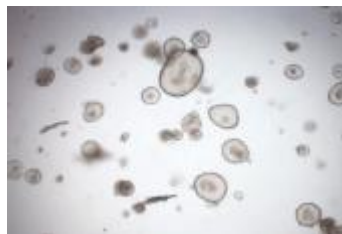


图:小鼠胆管类器官培养图

注意事项

- 1、产品的分装、使用等操作需在无菌环境下进行。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅供科研使用,不得用于临床诊断或治疗。